



Anwendung von Hippo-D



1 Besprühen Sie den Retraktor vor der Anwendung mit Wasser.

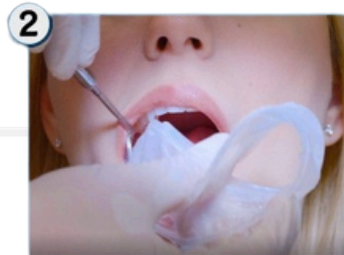

2 Setzen Sie den Retraktor in der Reihenfolge rechts → links → unten → oben beim Patienten ein.

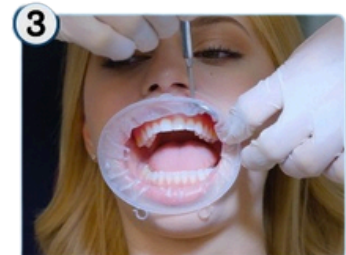

3 Richten Sie Ober- und Unterlippe mit einem Spiegel so aus, dass der rote Lippenbereich sichtbar ist.



4 Biegen Sie die Saugspitze in einem Winkel von 10° bis 20° ab.



5 Greifen Sie es mit einer Pinzette und setzen Sie es in der Reihenfolge Innenring → Außenring ein.



6 Um die Absaugung zu aktivieren, heben Sie die Saugspitze an und hängen Sie sie in den Fixierungsring ein.


Tipps zum Tragen von Hippo-D



Je nach Behandlungsbereich kann der Retraktor zur Platzierung gedreht werden.



Die Saugspitze erzeugt auch bei leichtem Kontakt keinen Unterdruck

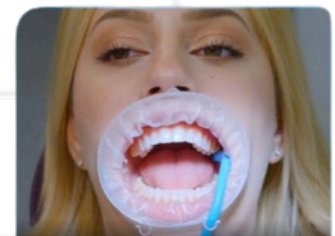

Die Saugspitze verliert auch bei Verwendung nur einer Spitze keinen Unterdruck.



Während der Behandlung lässt sich der Mund mit dem Retraktor mithilfe einer Pinzette einfach öffnen.



Wenn der Innenring während der Behandlung stört, kann er mit einem Spiegel zur zusätzlichen Retraktion nach innen gedrückt werden.



Über den Ein-/Ausschalter der Absperrvorrichtung für die Absaugung kann der Zahnarzt den Unterdruck während der Behandlung im Sitzen steuern.



Hier scannen für Videoanleitung