


SMART DENTISTRY

PRODUKTHIGHLIGHTS FÜR DIE PROPHYLAXE

Gemeinsam verbessern wir die Zahnmedizin



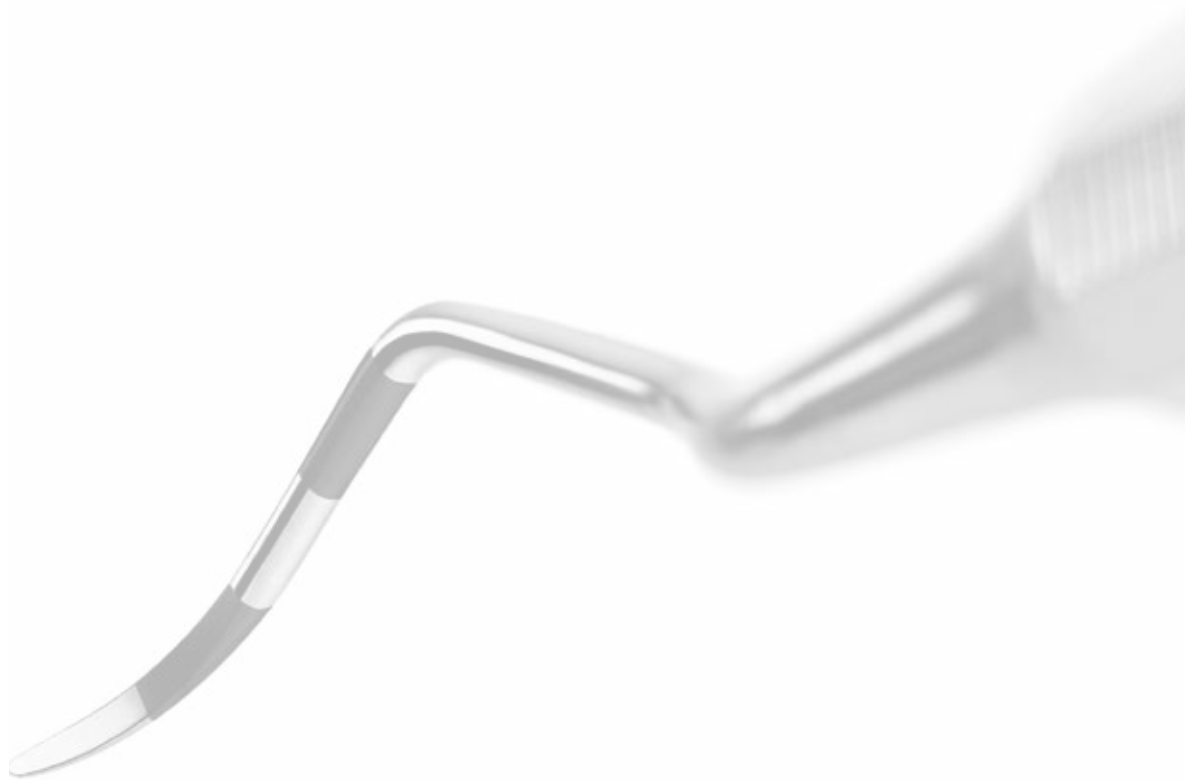

Wir sind für Sie da

Unsere ausgebildeten Medizinprodukteberater schulen und beraten Sie gerne persönlich in Ihrer Praxis.



Lena Engel
Gebietsverkaufsleiterin
PLZ-Gebiet D: 20-29, 30-32, 37-38
Mobil: +49 (0)162 210 50 42
E-Mail: L.Engel@ADSystems.de



Ringolf Papenbrock
Gebietsverkaufsleiter
PLZ-Gebiet D: 01-04, 06, 10, 12-19, 39
Mobil: +49 (0)162 258 38 12
E-Mail: R.Papenbrock@ADSystems.de



Nadine Brübach
Gebietsverkaufsleiterin
PLZ-Gebiet D: 34, 36, 55, 60-61, 63-69
Mobil: +49 (0)162 258 38 09
E-Mail: N.Bruebach@ADSystems.de



Nico Hölscher
Gebietsverkaufsleiter
PLZ-Gebiet D: 33, 35, 40-42, 44-49, 50-54, 56-59
Mobil: +49 (0)173 726 03 59
E-Mail: N.Hoelscher@ADSystems.de



Gebiet Deutschland Süd-Mitte
PLZ-Gebiet D: 86-89, 90-91
PLZ-Gebiet A: 60-69
Mobil: +49 (0)172 938 04 37
E-Mail: info@ADSystems.de



Patricio Zahn
Gebietsverkaufsleiter
PLZ-Gebiet D: 70-79, 97
Mobil: +49 (0)162 258 38 11
E-Mail: P.Zahn@ADSystems.de



Sabine Baeckmann
Gebietsverkaufsleiterin
PLZ-Gebiet D: 80, 82-84, 94
PLZ-Gebiet A: 10-12, 20-28, 30-36, 38-39, 40-49, 70-71
Mobil: +49 (0)152 227 949 24
E-Mail: S.Baeckmann@ADSystems.de




Konstantin Steffes
Gebietsverkaufsleiter
PLZ-Gebiet D: 07-09, 81, 85, 92-93, 95-96, 98-99
PLZ-Gebiet A: 50-57, 80-87, 89, 90-91, 94-99
Telefon: +49 (0)152 034 276 61
E-Mail: K.Steffes@ADSystems.de

Spezialistin Prophylaxe



Victoria Rutayisire
Produktmanagerin
Mobil: +49 (0)172 246 725 6
E-Mail: V.Rutayisire@ADSystems.de

Zum Online-Kontaktformular
und Online-Shop

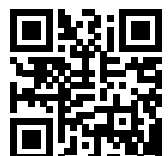

Inhaltsverzeichnis

PRÄSENZ-KURSE / ONLINE-KURSE

5

Deppeler: Handinstrumente für eine präzise Prophylaxe

DIE GRIFFE	7
DIAGNOSTIK	8
Paro-Sonden	8
Furkationssonden	9
Tastsonden	9
Doppelseitiger Mundspiegel	9
THERAPIE	10
Scaler	10
Universalküretten	11
Gracey-Küretten Classic	12
Gracey-Küretten Deep	13
Gracey-Küretten Mini-Profil	14
Smart Scaling	15
Titan-Implantatküretten	17
ERGÄNZENDE INSTRUMENTE	17
Titan-Implantatküretten	17
ERGÄNZENDE INSTRUMENTE	17
Sterilisationskassetten	17
SCHLEIFEN	18
Easy Sharp Schleifgerät	18
Easy Sharp Coach	18
Easy Sharp Zubehör	18

Keydent MyTip:

Multifunktionale Schall- und Ultraschallinstrumente

PASSEND FÜR KAVO* SONICFLEX* SCHALLGERÄTE	20
PASSEND FÜR KAVO* SCHALL- UND ULTRASCHALLGERÄTE	21
PASSEND FÜR SIRONA* SCHALLGERÄTE	22
PASSEND FÜR EMS* ULTRASCHALLGERÄTE	23
PASSEND FÜR ACTEON/SATELEC* ULTRASCHALLGERÄTE	24
PASSEND FÜR NSK* SCHALL- UND ULTRASCHALLGERÄTE	25

Designer-Lupenbrillen und Lichtsysteme aus Italien

ERGO, PRISMATIK ODER GALILEI	27
Univet ERGO Advanced	27
Univet MyErgo RFR	27
Univet Prismatik	27
Univet Galilei	27
Univet MyErgo Galilei	27
UNIVET ERGO ADVANCED – DIE MODELLE	28-29
ITA	28
ONE	28
ASH	29
TECHNE	29
UNIVET MYERGO RFR – DIE MODELLE	30
REGENT	30
SOHO	30
UNIVET PRISMATIK – DIE MODELLE	31-32
ITA	31
ONE	31
ASH	32
TECHNE und TECHNE RX	32
UNIVET GALILEI – DIE MODELLE	33-36
ITA	33
ONE	33
ASH	34
TECHNE und TECHNE RX	34
LOOK	35
COOL	35
UNIVET MYERGO GALILEI – DIE MODELLE	36
REGENT	36
SOHO	36
UNIVET QUICK LOUPES	37
TECHNE	37
LEISTUNGSSTARKE LICHTSYSTEME	38
EOS wireless	38
LYNX PRO	38
LYNX	38
ARLOUPE	39

* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für Kons-Schall- und Ultraschallgeräte von KaVo®, Kons-Schallgeräte von Sirona®, Kons-Ultraschallgeräte von EMS®, Kons-Ultraschallgeräte von Satalec® und Kons-Ultraschallgeräte von NSK®. KaVo® ist eine eingetragene Marke der KaVo Dental GmbH. SONICflex und SONICflex quick sind Marken der KaVo Dental GmbH. Sirona® ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH. EMS® ist eine eingetragene Marke der Electro Medical Systems SA. Satalec® ist eine eingetragene Marke der ACTEON Group. NSK® ist eine eingetragene Marke der Nakanishi Inc. Corporation. Ti-Max ist eine Marke der Nakanishi Inc. Corporation.



Parodontitis und ihre Wechselwirkungen

Referentinnen

DH Yvonne Gebhardt und DH Sonja Steinert



Kursinhalt

In diesem Workshop erhalten Sie umfassendes Wissen für die Behandlung von Parodontitis-Patienten/-innen. Zunächst führt Sie Yvonne Gebhardt durch moderne subgingivale Behandlungskonzepte – das Herzstück der PA-Therapie. Anschließend erklärt Ihnen Sonja Steinert die faszinierenden Zusammenhänge des Knochenstoffwechsels: Wie Entzündungen den Knochenabbau fördern und wie Sie mit gezielter Therapie und Vitamin D gegensteuern können.

- Vitamin D in der PA-Therapie: Sie lernen, Vitamin D3-Messungen in der Praxis durchzuführen und Laborwerte richtig zu interpretieren. Sie verstehen den Wirkungspfad von Vitamin D3 in der Zahnmedizin und erkennen Mangelsymptome. Praxiswissen zu Über- und Unterversorgung, VDR-Störungen und der D3-Ratio – inklusive konkreter Supplement-Empfehlungen bei Therapieresistenz.

Die Inhalte im Überblick

- Subgingivales Behandlungskonzept: von der Befundaufnahme über die PA-Therapie bis zur Reevaluation – Sie lernen parodontale Behandlungsbilder sicher zu erkennen und professionell zubehandeln.



Eintageskurs mit Hands-On-Training

PRÄSENZ



Von der Diagnose zur Prävention – Periimplantäre Gesundheit professionell gestalten

Referentin

Carmen Lanoway, RDH, BSc, MA Oral Health Promotion



Kursinhalt

Zahnimplantate sind in der modernen Zahnarztpraxis längst Routine – ihre langfristige Gesundheit und Stabilität jedoch nicht immer. Dieser Kurs vermittelt Ihnen das fundierte Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um periimplantäre Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, effektiv zu behandeln und nachhaltig zu vermeiden. Basierend auf aktueller evidenzbasierter Forschung und bewährten klinischen Protokollen lernen Sie, Ihre Patienten systematisch zur optimalen Implantatgesundheit zu führen.

Erkrankungen erkennen und systemische Risikofaktoren für die Implantatgesundheit identifizieren.

- Klinisches Management: Nicht-chirurgische Dekontaminationsprotokolle sicher anwenden, Biofilm-Unterschiede zwischen Implantaten und natürlichen Zähnen therapeutisch nutzen und Patienten-Compliance durch optimierte Pflege und Recall-Strategien stärken.

Lernziele

- Diagnostik & Prävention: Gesunde von kompromittierten Implantaten sicher unterscheiden, Frühzeichen periimplantärer



Eintageskurs mit Hands-On-Training

PRÄSENZ



Inhouse-Schleifkurs: Schärfen des dentalen Instrumentariums

Referentin

Victoria Rutayisire

Kursinhalt

Dentale Instrumente, wie z. B. Scaler und Küretten müssen regelmäßig geprüft und bei Bedarf geschärft werden. Scharfe Handinstrumente erleichtern die Handhabung und ermöglichen ein effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten. Die verlängerte Lebensdauer für Ihre geschliffenen Instrumente wirkt sich zusätzlich positiv auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis aus.

zustellen und somit eine gleichbleibende Leistung bei allen Behandlungen zu erzielen

- Schnelles, präzises und sicheres Nachschleifen
- Schleifvarianten – manuell und maschinell

Die Schwerpunkte:

- Instrumentenlehre – Unterschiede erkennen und beim Schleifen beachten
- Erlernen der richtigen Handhabung beim Schleifen – um exakte Klingenformen und Schneidekantenwinkel wiederher-

Buchen Sie hier Ihren
Inhouse-Schleifkurs:



IN IHRER PRAXIS



Deppeler: Handinstrumente für eine präzise Prophylaxe

Die Deppeler SA ist seit 1934 auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen dentalen Handinstrumenten spezialisiert. Als ein Unternehmen der besonderen Art fertigt es Dentalinstrumente von unvergleichlicher Präzision – und das seit mehr als acht Jahrzehnten. Basierend auf den Werten Tradition, Präzision und Innovation bietet Deppeler Instrumente an, deren Form und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt sind, und die Erwartungen übertreffen. Die Verwendung ausgewählter Rohstoffe und die strengen Maßstäbe, die Deppeler bei der Arbeit anlegt, sind wesentliche Parameter für den Erfolg des Unternehmens.

Der M23® Scaler, der Farbcode der Gracey-Küretten sowie die Instrumentensätze aus Titan für Implantate sind Entwicklungen der Deppeler SA, die ihre Aufgabe darin sieht, erstklassige Instrumente zu konzipieren und herzustellen. Deppeler-Instrumente, die nach Schweizer Tradition von Hand gefertigt werden, vereinen Flexibilität und Dauerhaftigkeit und garantieren somit eine unvergleichliche Langlebigkeit.

Erfahren Sie mehr



DIE GRIFFE

Alle Griffe sind sterilisierbar im Autoklaven bis 134°C.

CN

Ausgesprochen hygienisch dank der CLEANext Technology: CN-Griffe sind hermetisch abgedichtet, sodass keine Flüssigkeiten eindringen können. Festgelegte Farbe gemäß Deppele Farbcodierung.



DSS1 CN

Fast alle Instrumente mit CN-Griff können auch mit ADEP-Griff bestellt werden.

ADEP

Freie Farbauswahl. Erhältlich für die meisten Instrumente. Diese Griffe sind nicht abnehmbar.



DSS1+ADEP RS



VI



BC



V



G



VC



O



J



R



N



RS



B

Montage-Anleitung der
ADEP-Griffhülsen



Classic

Alle Instrumente sind in der klassischen Version aus hochwertigem Stahl verfügbar.



DSS1

DMS-Griffe

Spiegel- und Ansatz-Griff aus Kunststoff hergestellt, ergonomisch. Erhältlich in Grün und Schwarz.



DMS-V



DMS-N

DIAGNOSTIK

Paro-Sonden

Graduierungen der Sonden werden eingelasert, wodurch die Farbe bei der Desinfektion und Sterilisation nicht verloren geht.



UNC15-DMS-N

Für eine atraumatische Sondierung

Dank ihrer perfekt abgerundeten Spitze, mit einem Durchmesser von 0,48 mm, erlaubt die UNC15 Parodontalsonde eine atraumatische Sondierung. Sie zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Widerstandsfähigkeit aus und verfügt über eine präzise und langlebige Markierung von 1 bis 15. Durch das Herstellungsverfahren entfallen die Kerben, die bei anderen ähnlichen Sonden vorhanden sind.

Speziell für die periimplantäre Sondierung ist die Sonde UNCPP15 entwickelt worden. Eine feine, flexible und gleichzeitig solide PA-Sonde aus dem thermoplastischen Kunststoff Polyetheretherketon (PEEK).

Stahl



UNC15



Peek



UNCPP15



Erhältlich als einschraubbarer Ansatz oder mit DMS-Griff in Grün (DMS-V) oder Schwarz (DMS-N).



HH12

Parodontometer. Produkteigenschaften: Graduierung 3-6-9-12 mm; perfekt abgerundete Spitze 0,48 mm Durchmesser; dauerhafte und präzise Markierung; flexibel und widerstandsfähig.



PP12

Außergewöhnliche Kunststoffparodontalsonde zur Sondierung bei Periimplantitis. Passt sich auch natürlicher Zahnmorphologie an. Produkteigenschaften: Graduierung 3-6-9-12 mm; perfekt abgerundete Spitze 0,50 mm Durchmesser; dauerhafte Markierung, aus resistentem und flexiblem Kunststoff.

6150515 Deppeler Perio Probe UNC15 aus Stahl (3)
6150516 Deppeler Perio Probe UNCPP15 aus Peek (3)
6040230 DMS-N-Griff Schwarz

6040240 DMS-V-Griff Grün
6080440 HH12 Ansatz ohne Griff
6150510 PP12 Ansatz ohne Griff



WHO

Parodontalsonde gemäß WHO. Produkteigenschaften: Graduierung 3,5-5,5-8,8-11,5 mm; Kugel von 0,5 mm Durchmesser; dauerhafte und präzise Markierung, flexibel und widerstandsfähig.



Furkationssonden

Furkationssonden gibt es in zwei verschiedenen Durchmessern (Arbeitsenden) sowie mit verschiedenen Markierungen (ein bzw. mehrteilig). Nicht zum Messen geeignet.



ZA3

Furkationssonde nach Prof. Zappa. Einteilung: 3-6-9-12 mm. Durchmesser: 0,5 mm. Das Deppele-Herstellungsverfahren garantiert eine perfekt abgerundete Spitze und eine außerordentlich glatte Oberfläche.

Tastsonden

Dank der speziellen Eigenschaften des Stahls haben die Sonden eine unvergleichbare Lebensdauer. Jedes Arbeitsende wird von Hand gefertigt, um eine perfekte Spitze zu erhalten. Die Sonden zeichnen sich durch ihre besondere Flexibilität und Widerstandsfähigkeit aus.



DH2

Doppelendige Tastsonde für die subgingivale Untersuchung mit Standard-Griff für ein perfektes Tastempfinden. Produkteigenschaften: Form wie Gracey 11/12, sterilisierbar bis 134°C.

Doppelseitiger Mundspiegel



MIR-DDMS-N

Doppelseitiger Mundspiegel mit schwarzem Griff. Beschlagfrei dank Rhodium-Legierung.

6190620 WHO mit DMS-N-Griff Schwarz
6790820 ZA3 mit ADEP-Griffen Rosa

6540110 DH2 mit ADEP-Griffen Rosa
6040236 MIR-DDMS-N Mundspiegel doppelseitig mit Griff Schwarz

THERAPIE


Scaler

Die Scaler von Deppeler zeichnen sich durch ihre einzigartige Schärfe und lange Lebensdauer aus.



M23®

M23® – das ORIGINAL. Dank der revolutionären Abwinkelung ermöglicht der von Deppeler SA entwickelte M23® Scaler das Arbeiten rund um den Zahn, sowohl bei den Molaren und Prämolaren als auch bei den Inzisoren. Sterilisierbar bis 134°C.

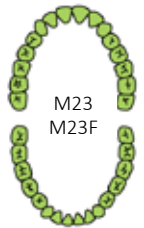

M23F®

M23F® – das ORIGINAL, dünne Ausführung. ACHTUNG: Nicht nur die Klinge, sondern der ganze Schaft ist dünner. Diese Form bietet eine bessere Sensibilität bei der Arbeit.



M21

Die abgewinkelte Form des M21-Scalers ist für den einfachen Zugang zu den approximalen Oberflächen von Prämolaren und Molaren ausgelegt.



M21F

Graziler, gegengewinkelter Scaler für einfacheren Zugang zum Approximalraum.



HP 551

Gerader, doppelter Scaler für Schneide- und Eckzähne, nach der Geneva School of Dental Hygienists.



PY151

Mini-Klinge für die Behandlung von sich überlappenden Zähnen.

Die Scaler von Deppeler zeichnen sich durch ihre einzigartige Schärfe und lange Lebensdauer aus.

6920160 M23® mit CN-Griff Grün
6920190 M23F® mit CN-Griff Grün
6950890 PY151 mit CN-Griff Miami-Blau

6920140 M21 mit CN-Griff Grün
6920150 M21F mit CN-Griff Grün
6880610 HP551 Scaler mit CN-Griff Miami-Blau



Modifizierter Sichelscaler, der in Zusammenarbeit mit der Dentalhygienikerin Beate Gattermann entwickelt wurde und auf den bewährten Scaler-Modellen AP67 und H6/H7 basiert. Diese Version verfügt über eine 4 mm längere Arbeitsspitze, die einen verbesserten Zugang zu tieferen und posterioren Bereichen ermöglicht.




„Der AP67L ist länger und erleichtert dadurch meine Arbeitsbedingungen, meinen Arbeitsalltag und die Behandlung am Patienten erheblich.“

Beate Gattermann, Diplom Dentalhygienikerin.

Universalküretten



Universalkürette M23A®, für die Reinigung aller Wurzeloberflächen. Produkteigenschaften: alle Wurzeloberflächen, Frontzähne und Prämolaren/Molaren; 0,95 mm; sterilisierbar bis 134°C.

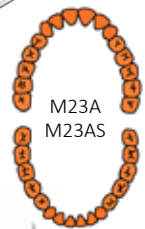

Universalkürette, feine Ausführung, für die Reinigung aller Wurzeloberflächen. Die feine Spitze ermöglicht den Zugang zu engsten Bereichen, ohne diese zu beschädigen.



Schmale Universalkürette mit optimalem Winkel und einem längeren Arbeitsende für einen besseren Zugang zum Approximalraum. Produkteigenschaften: alle Zahnoberflächen, Frontzähne und Prämolaren, Molaren; 0,8 mm; sterilisierbar bis 134°C.



Universalkürette mit optimaler Abwinkelung für den Frontzahnbereich.

6010621 AP67L Scaler mit CN-Griff Miami-blau
6920170 M23A® mit CN-Griff Orange
6980390 TI23AS mit CN-Griff Orange

6920180 M23AS® mit CN-Griff Orange
6870840 GX4 mit CN-Griff Violett

Gracey-Küretten Classic

Klassische Gracey-Küretten, erhältlich mit CN-Griff, ADEP-Griffen oder dem Originalgriff.



5/6 Gracey-Kürette Classic.



7/8 Gracey-Kürette Classic.



11/12 Gracey Kürette Classic.



13/14 Gracey Kürette Classic.



15/16 Gracey Kürette Classic. Stärker gewinkelt als die 11/12, kommt so besser in den Interdentalbereich.



17/18 Gracey-Kürette Classic. Mit dieser Kürette können die distalen Flächen der stark nach hinten gekrümmten Molaren erreicht werden.


6870360 5GE6 mit CN-Griff Gelb
6870370 7GE8 mit CN-Griff Grau
6870390 11GE12 mit CN-Griff Rot

6870400 13GE14 mit CN-Griff Blau
6870410 15GE16 mit CN-Griff Rot
6870420 17GE18 mit CN-Griff Blau

Gracey-Küretten Deep

Das Deep Gracey-Sortiment bietet mehr Komfort für Behandler und Patienten. Dank eines längeren Schafts und einer passenden Abwinkelung ist es bestens für tiefe Taschen geeignet.

Bei gleicher Klingendicke und damit gleicher Lebensdauer erhalten Sie den Komfort einer Kürette, mit der Sie einfacher bis auf den Grund der Taschen gelangen können. Veränderte Abwinkelung für besseren Zugang zur Tasche, größere Länge und mehr Stabilität.

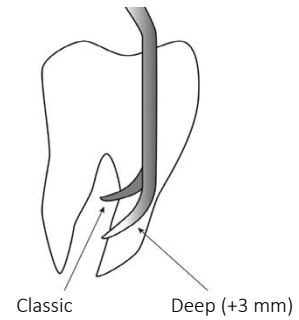

5GL6

5/6 lange Gracey Kürette für die Frontzähne.



7GL8

7/8 lange Gracey Kürette bukkal/palatinal.



11GL12

11/12 lange Gracey Kürette mesial.



13GL14

13/14 lange Gracey Kürette distal.

Gracey-Küretten Mini-Profil

Die kürzeren, feineren Klingen sowie optimale Winkelung und Angulation des Instruments sorgen für eine nicht-invasive Kürettage.



5PM6

5/6 Gracey-Kürette Mini-Profil.



7PM8

7/8 Gracey-Kürette Mini-Profil.



11PM12

11/12 Gracey-Kürette Mini-Profil.



13PM14

13/14 Gracey-Kürette Mini-Profil.

Fallbeispiele aus der Praxis



UPT-Behandlung an den Molaren mit distaler Kürette.



UPT-Behandlung an den Schneidezähnen mit DSS1.



Hier wurde die DSS2 mit Skalierung verwendet, im mesialen Bereich des 47.

Fotos von DH Sonja Steinert.

6950410 5PM6 mit CN-Griff Gelb
6950420 7PM8 mit CN-Griff Grau

6950430 11PM12 mit CN-Griff Rot
6950440 13PM14 mit CN-Griff Blau

Smart Scaling

Komplette Parodontalbehandlung mit nur zwei Küretten

Die Smart Scaling Instrumente entsprechen in ihrer Form, Winkelung, Klingendicke und Klingenform den spezifischen Bedürfnissen des Zahnarztes und bieten somit maximalen Benutzerkomfort. Das DSS-Instrumentensystem ist das erste seiner Art, das eine Zahnreinigung in den Taschen ermöglicht, ohne dabei die visuelle Tiefenkontrolle zu beeinträchtigen. Die zwei DSS-Küretten können bis zu neun Instrumente mit den gleichen Funktionen ersetzen.



Sicheres und präzises Arbeiten dank der Tiefenmarkierung.



Tiefenmarkierung: 3-6-9-12

Die Vorteile im Überblick

- Revolutionäre Klinge: Beidseitig geschliffen mit offenem Winkel und leicht konischer sowie abgerundeter Form – bestmögliche Arbeitssicherheit ohne Risiko, das gesunde Gewebe zu verletzen
- PAR-sondenartige Tiefenmarkierung (3-6-9-12 mm): Ermöglicht eine lokal präzise Entfernung von Konkrementen ohne Traumatisierung des gesunden Gewebes
- Dank dieser Eigenschaften wird die Reduktion auf nur zwei Arbeitsinstrumente ermöglicht, mit denen sämtliche Flächen von Molaren, Prämolaren und Frontzähnen erreicht werden können.
- Die Graduierungen werden eingelasert, wodurch die Farbe bei der Desinfektion und Sterilisation nicht verloren geht.



Je offener der Winkel, desto mehr Sicherheit bei der Behandlung.




6840410 DSS1 Smart Scaling Kürette CN-Griff Schwarz
6840420 DSS2 Smart Scaling Kürette CN-Griff Schwarz
6840510 DS1 Scaling 1 Kürette mit CN-Griff Schwarz


6840520 DS2 Scaling 2 Kürette mit CN-Griff Schwarz

Titan-Implantatküretten


Wirksam ohne zu beschädigen: Die Implantatküretten bestehen aus purem Titan und sind etwas weniger hart als das Implantat, zur schadlosen Anwendung.

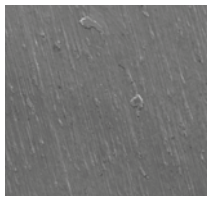

Oberfläche eines
Titanimplantats
unter dem Mikroskop.*

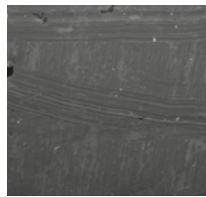

Mit einer Stahl-
Kürette behandelt.*

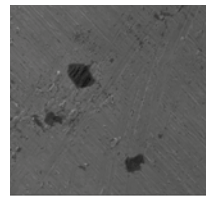

Mit einer Titan-
Kürette behandelt.*

* L. Parisi, C. Lorenzi,
A. Genovesi (2015)
"Trattamento di colli
implantari con tre tipi
di curette: TITANIO -
ACCIAIO - PLASTICA".



AD23CN

Die Form der Spitze entspricht dem M32A. Mit dieser Form ist die Behandlung aller Oberflächen möglich.



TIS1CN



TIS2CN

Instrumente zur Behandlung aller Implantatoberflächen.



„Die neu gestalteten Titaninstrumente
von Deppeler sind eine Klasse für sich.
Dank der Entwicklung einer kleineren, aber
dennoch langlebigen Arbeitsspitze wird ein
besserer Zugang zu engen Weichgewebenischen
oder Bereichen rund um die Suprakonstruktion
ermöglicht.“

Bernita Bush Gissler, RDH,BS, Bern, Schweiz

ERGÄNZENDE INSTRUMENTE

Furkationsinstrumente



Foto von DH Sonja Steinert.



Universalkürette mit offenem Winkel und leicht konischer Spitze, um Furkationen Grad 1-2 besser zu erreichen.



Universalkürette für Furkationen Grad 2-3. Die abgerundete Spitze ermöglicht die optimale Reinigung des Furkationsdachs.



LAGERUNG

Sterilisationskassetten



CLEANext B10 für 10 Instrumente



CLEANext B5 für 5 Instrumente

Die einzigen Sterilisationskassetten mit 3D-Hygiene:

- Kein Silikon zur Fixierung der Instrumente
- Absolut durchlässig
- Vollständig offene Ecken

6860110 F10CN Furkationskürette CLEANext Orange
6860120 F11CN Furkationskürette CLEANext Orange
6860130 F12CN Furkationskürette CLEANext Violett

6860140 F13CN Furkationskürette CLEANext violett
6030510 CLEANext B10 für 10 Instrumente
6030530 CLEANext B5 für 5 Instrumente

SCHLEIFEN

Easy Sharp Schleifgerät

Gut geschärfte Instrumente erlauben eine effizientere und wirtschaftlichere Arbeitsweise. Mit dem EASY SHARP Schleifgerät können Küretten und Scaler schnell, präzise und sicher nachgeschärft werden.


Das EASY SHARP Schleifgerät ermöglicht es, die exakten Klingenformen und Schneidekantenwinkel wiederherzustellen und somit eine gleichbleibende Leistung bei allen Behandlungen zu erzielen.



Video Easy Sharp Schleifgerät



Easy Sharp Coach

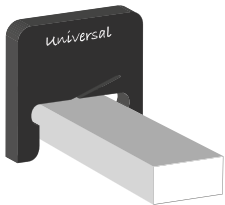

Ideales Werkzeug zum Erlernen von manuellem Schärfen von Instrumenten:

- Richtige Bewegung
- Richtiger Schleifwinkel
- Längere Lebensdauer der Klingen
- Keine Richtungsabweichung beim Schleifen

Video Easy Sharp Coach



INFO

Bleiben Sie up to date mit einem Inhouse-Schleifkurs.


Weitere Infos auf Seite 5.

Easy Sharp Zubehör



ESS1

Schwarzer Arkansas Naturstein zur Schärfung von Dentalinstrumenten.
Maße: 25 x 100 x 12 mm.

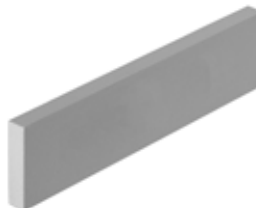

ESS4

Schleifstein für Titan-Küretten (25 x 100 x 6 mm). Kompatibel mit Easy Sharp Gerät und Coach.



TEST-Stick

Teststäbchen, Packungen von 6 Stück.



Schleiföl (50 ml)

Geruchloses und farbloses Öl. Seine Fließfähigkeit erlaubt ein optimales Schleifen.




Uhrenmacherlupe

Zur Kontrolle der Klingen Ihrer Instrumente nach dem Schleifen. 6,7-fache Vergrößerung.

6050110 Easy Sharp Schleifgerät inkl. ESS1 Schleifstein
6050610 Easy Sharp Coach (2) + ESS1 Schleifstein
6050630 ESS1 Schleifstein Ceramic
6050660 ESS4 Schleifstein für Titan-Küretten

6180100 EASY SHARP Teststäbchen (6)
6140110 EASY SHARP Schleiföl (50 ml)
6991100 Uhrenmacherlupe

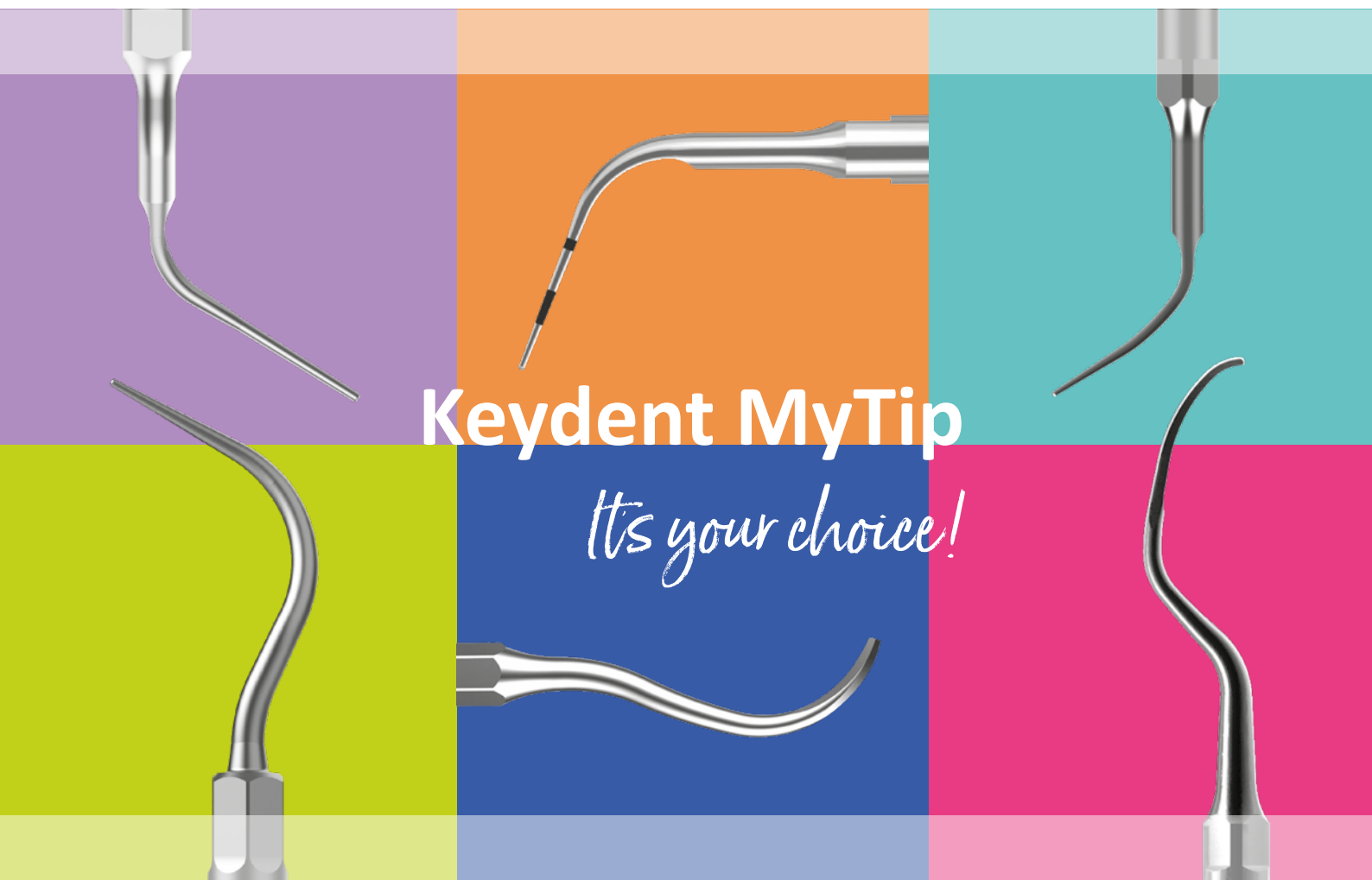

Keydent MyTip: Multifunktionale Schall- und Ultraschallansätze

Ebenso wie sich andere Instrumente im Rahmen der Behandlung abnutzen, verschleißten auch Schall- und Ultraschallspitzen im Laufe der Zeit und sollten ersetzt werden, um ein gleichbleibendes Ergebnis zu erzielen. Die Keydent MyTip Schall- und Ultraschallspitzen werden nach den höchsten europäischen Qualitätsstandards gefertigt. Sie durchlaufen ein strenges, umfangreiches Testverfahren, um ihre Leistungsfähigkeit und Passgenauigkeit mit den Geräten der gängigen Markenhersteller zu gewährleisten. Natürlich sind die Keydent MyTip Schall- und Ultraschallspitzen CE-zertifiziert.

Schall- und Ultraschallgeräte erlauben eine einfache, ermüdungsfreie und gleichzeitig minimalinvasive Entfernung von Zahnstein und Konkrementen. Abhängig vom Geräte-Hersteller steht dem/der Anwender/in eine mehr oder weniger breite Produktpalette zur Verfügung. Die Keydent MyTip Schall- und Ultraschallspitzen für die supra- und subgingivale Reinigung sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich, je nach Anwendungsgebiet und Indikation.

Erfahren Sie mehr



KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR KAVO* SONICFLEX* SCHALLGERÄTE)

SONICflex*



Keydent MyTip k#5 (GK1)
Universal Scaler

Zur Entfernung von leichten bis mittleren Konkrementen und Plaque-Ablagerungen im supragingivalen Bereich.

3751722



Keydent MyTip k#6
Fine Scaler

Besonders feine Schallspitze zur Anwendung in schwer zugänglichen Interdentalräumen.

3751723



Keydent MyTip k#7 (GK3)
Perio

Zur Entfernung von Konkrementen im subgingivalen Bereich.


3751727



Keydent MyTip k#8 (GK4)
Perio

Zur Entfernung von Konkrementen im subgingivalen Bereich.


3751728

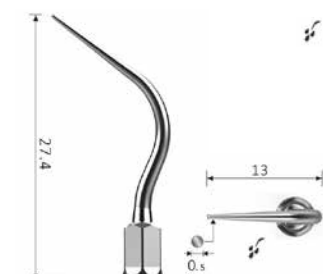

Keydent MyTip k#60
Perio

Zur schonenden Taschenreinigung bei der Parodontalbehandlung im Frontzahnbereich.


3751724

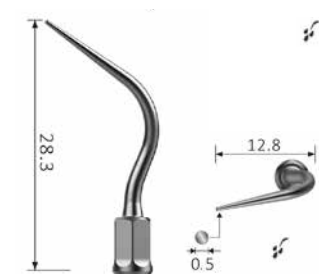

Keydent MyTip k#61
Perio links

Nach links gebogen, für den bukkalen Zugang. Sanfte, aber effektive Reinigung.


3751725

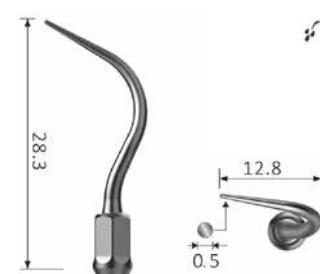

Keydent MyTip k#62
Perio rechts

Nach rechts gebogen, für den bukkalen Zugang. Sanfte, aber effektive Reinigung.

3751726

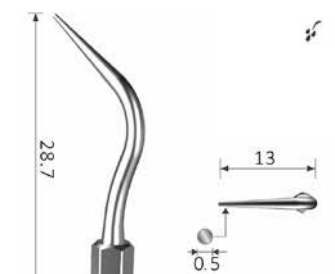

Keydent MyTip GK5
Scaler & Perio

Zur Entfernung von Konkrementen im supra- und subgingivalen Bereich.


3751719



Keydent MyTip kICP Set
Implantat-Reinigung

Zur sub- und supragingivalen Reinigung von Implantaten. Austauschbare Spitze. Das Set enthält 1 ICP, 1 ICP-Schlüssel und 2 Ersatzspitzen.

3751947

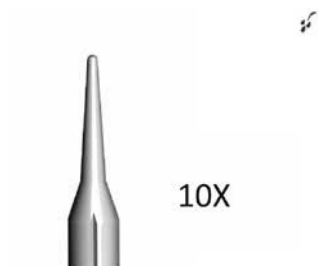

Keydent MyTip ICPpeek
Ersatzspitzen

Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel.

3751949



Keydent MyTip Schlüssel
TW KAV Qn

Passend für KaVo* SONICflex*, PIEZOlux*, SONOsoft* & SONICflex quick* Schall- und Ultraschallgeräte.

3751738




Keydent MyTip Schlüssel
TW KAV M

Passend für KaVo* PiezoLED* & PIEZOsoft* Schallgeräte.

3751741

KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR KAVO* SCHALL- UND ULTRASCHALLGERÄTE)


PIEZOlux* & SONOsoft*

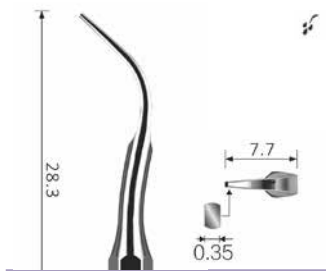

Keydent MyTip k#9
Scaler Sichel

Zur Entfernung von Konkrementen und Plaque-Ablagerungen im supragingivalen Bereich.

3751662

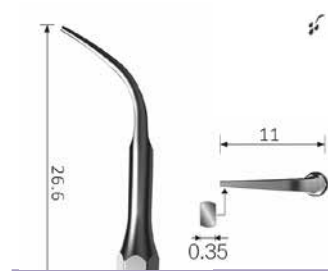


Keydent MyTip k#10
Scaler

Zur Entfernung von Konkrementen und Plaque-Ablagerungen im supragingivalen Bereich.

3751660


PiezoLED* & PIEZOsoft*

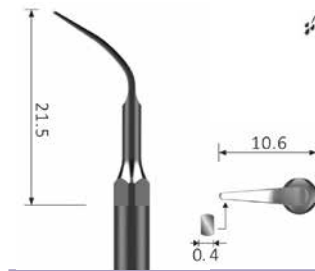

Keydent MyTip k201
Universal Scaler

Zur präzisen Entfernung von massiven Konkrementen und Plaque-Ablagerungen im supragingivalen Bereich.

3751657

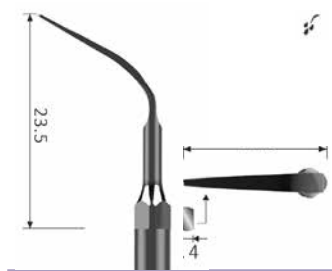


Keydent MyTip k202
Perio

Schallspitze für die Entfernung von hartnäckigen Konkrementen im sub- und supragingivalen Bereich.

3751658


SONICflex quick*

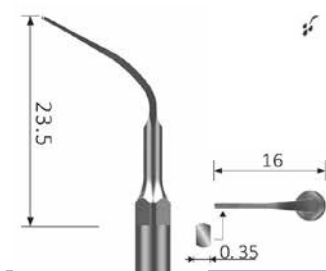

Keydent MyTip k203
Perio Slim

Minimalinvasive Ultraschallspitze für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen.


3751659

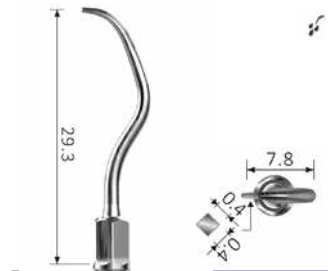

Keydent MyTip k5A
Universal Scaler

Zur Entfernung von Konkrementen und Plaque-Ablagerungen an allen Zahnoberflächen.

3751711

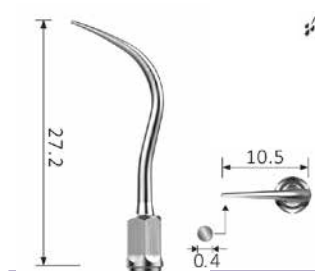

Keydent MyTip k6A
Fine Scaler

Zur Anwendung in engen und schwer zugänglichen Bereichen.


3751715



Keydent MyTip k7A
Perio

Instrument für Scaling im subgingivalen Bereich.


3751716

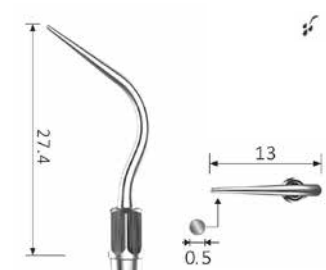

Keydent MyTip k60A
Perio gerade

Zur schonenden Taschenreinigung bei der Parodontalbehandlung im Frontzahnbereich.


3751712

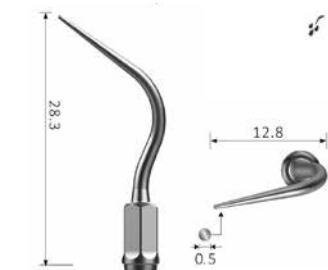

Keydent MyTip k61A
Perio links

Nach links gebogen, für den bukkalen Zugang. Sanfte, aber effektive Reinigung.

3751713

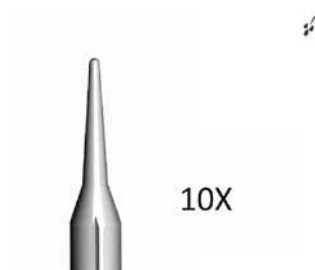

Keydent MyTip ICPpeek
Ersatzspitzen


Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel.

3751949

* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für PIEZOlux, SONOsoft, PiezoLED und PIEZOsoft Ultraschallgeräte von KaVo®. KaVo® ist eine eingetragene Marke der KaVo Dental GmbH. PIEZOlux, SONOsoft, PiezoLED und PIEZOsoft sind Marken der KaVo Dental GmbH.

KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR SIRONA* SCHALLGERÄTE)


Scaling

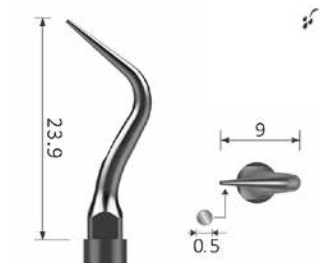

Keydent MyTip sr3L
Interdental Scaler

Zur Entfernung von leichten bis mittelschweren Konkrementen beim subgingivalen Scaling.


3751705

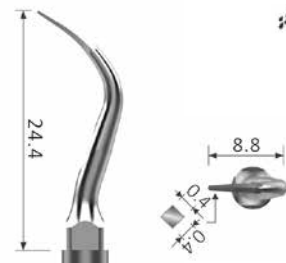

Keydent MyTip sr4L
Universal Scaler

Besonders feine Schallspitze, ideal für supra- und subgingivale Zahnoberflächen im Interdentalbereich.

3751706

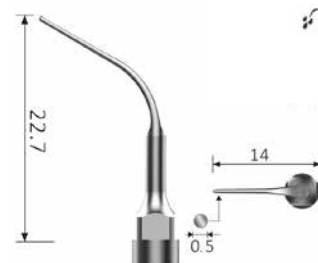

Keydent MyTip srPE1
Perio gerade

Zur Reinigung von Wurzeloberflächen in tiefen Zahnfleischtaschen.

3751707



Keydent MyTip srPE2
Perio rechts

Nach rechts gebogen. Zur Reinigung von Wurzeloberflächen in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

3751708



Keydent MyTip srPE3
Perio links

Nach links gebogen. Zur Reinigung von Wurzeloberflächen in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich.

3751709


Implantat-Reinigung



Keydent MyTip srICP Set
Implantat-Reinigung

Zur sub- und supragingivalen Reinigung von Implantaten. Austauschbare Spitze. Das Set enthält 1 ICP, 1 ICP-Schlüssel und 2 Ersatzspitzen.

3751946

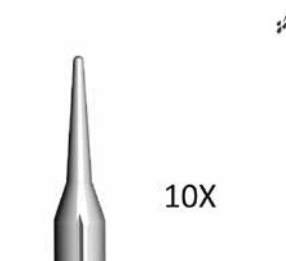

Keydent MyTip ICPpeek
Ersatzspitzen

Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel.

3751949



Keydent MyTip Schlüssel
TW SIR P







Passend für Sirona* Schallgeräte.

3751739


* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für Konschallgeräte von Sirona®. Sirona® ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH.

KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR EMS* ULTRASCHALLGERÄTE)

Scaling & Periodontics

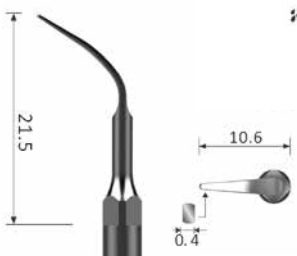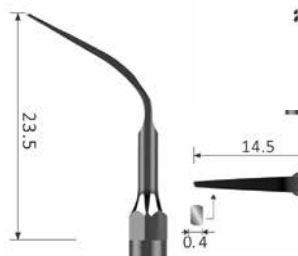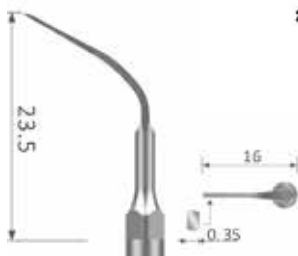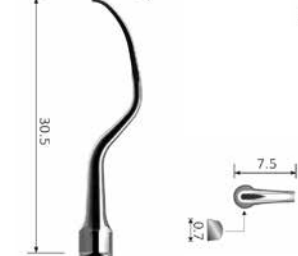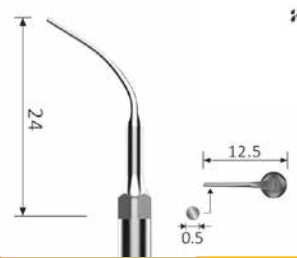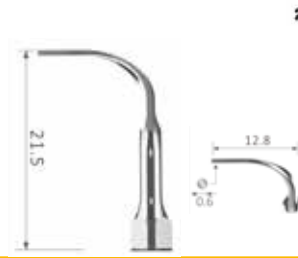 Keydent MyTip eA Universal Scaler Zur supragingivalen Konkrement-Entfernung in allen Quadranten. 3751612	 Keydent MyTip eP Perio Präzise Entfernung von hartnäckigen Konkrementen in sub- und supragingivalen Bereichen. 3751613	 Keydent MyTip ePS Perio Slim Minimalinvasive Ultraschallspitze für die Zahnsteinentfernung in tiefen Parodontaltaschen. 3751615	 Keydent MyTip eH3 (P5) Perio Frontzahn Speziell für den Frontzahnbereich. Instrumentenspitze liegt parallel zur Zahnfleischtasche. 3751600
 Keydent MyTip ePL3 Perio Cleaning Zur Reinigung und Desinfektion von Parodontaltaschen, besonders geeignet in der Nachsorge und Erhaltungstherapie. 3751614	 Keydent MyTip P6L Perio Zur subgingivalen Konkrement-Entfernung. Nach links gebogene Form. 3751610	 Keydent MyTip P6R Perio Zur subgingivalen Konkrement-Entfernung. Nach rechts gebogene Form. 3751611	

Implantat-Reinigung

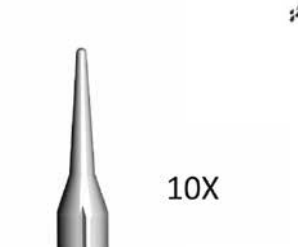 Keydent MyTip eICP Set Implantat-Reinigung Zur sub- und supragingivalen Reinigung von Implantaten. Austauschbare Spitze. Das Set enthält 1 ICP, 1 ICP-Schlüssel und 2 Ersatzspitzen. 3751942	 Keydent MyTip ICPpeek Ersatzspitzen Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel. 3751949
---	---

* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für Kons-Ultraschallgeräte von EMS® sowie Ultraschallgeräte mit Gewinden passend für Ansätze von EMS® und Satelec®. EMS® ist eine eingetragene Marke der Electro Medical Systems SA. Satelec® ist eine eingetragene Marke der ACTEON Group.

KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR ACTEON/SATELEC* ULTRASCHALLGERÄTE)


Scaling



Keydent MyTip s#1
Universal Scaler

Für supragingivales Scaling zur Entfernung von Zahnstein.

3751653

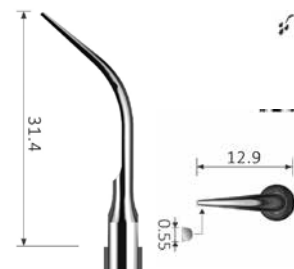


Keydent MyTip s1S
Slim Scaler

Zur effektiven Entfernung von Zahnstein und Plaque in allen Quadranten.

3751656


Periodontics

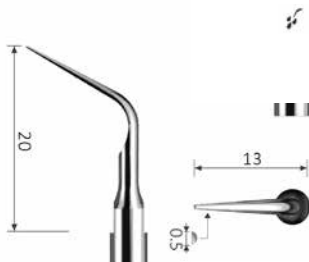

Keydent MyTip s10X
Scaler interproximal

Flaches Design, um interdental schwer zugängliche Flächen zu erreichen.


3751638

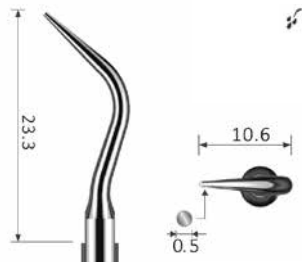

Keydent MyTip s10P
Perio Slim

Für kleine Taschen von 2 bis 3 mm Taschentiefe.

3751637

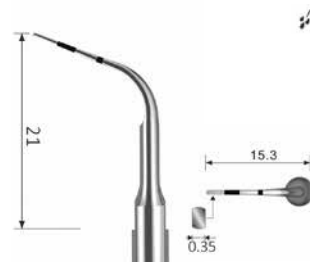

Keydent MyTip s10Z
Perio

Subgingival. Für mittlere Taschen (< 4 mm). Beseitigung von weichen Ablagerungen und Beobachtung der Taschentiefe anhand der 3 mm-Skala.

3751639


Implantat-Reinigung



Keydent MyTip sICP Set
Implantat-Reinigung

Zur sub- und supragingivalen Reinigung von Implantaten. Austauschbare Spitze. Das Set enthält 1 ICP, 1 ICP-Schlüssel und 2 Ersatzspitzen.

3751943

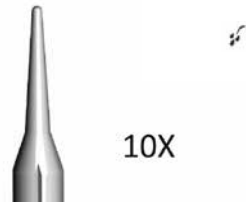

Keydent MyTip ICPpeek
Ersatzspitzen




Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel.

3751949



* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für Kons-Ultraschallgeräte von Satelec®. Satelec® ist eine eingetragene Marke der ACTEON Group.

KEYDENT MYTIP (PASSEND FÜR NSK* SCHALL- UND ULTRASCHALLGERÄTE)

Piezo-Scaling (Varios*)

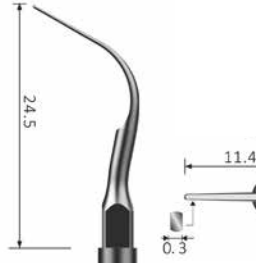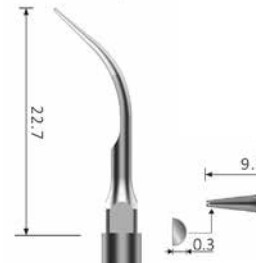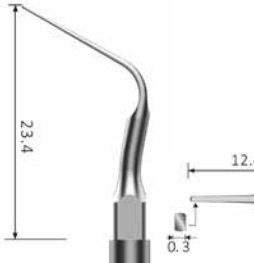 Keydent MyTip nG1 Universal Scaler Zur Entfernung von Konkrementen in supra- und subgingivalen sowie sehr engen Bereichen. 3751675	 Keydent MyTip nG6 Slim Scaler Schmal. Zur Entfernung von Konkrementen in supra- und subgingivalen sowie sehr engen Bereichen. 3751678	 Keydent MyTip nG8 Universal Slim Scaler Schlank. Zur Entfernung von Konkrementen in supra- und subgingivalen Bereichen. Sehr anschmiegsam im Interdentalraum. 3751679	 Keydent MyTip nG16 Scaler interproximal Zur Entfernung von Konkrementen aus interproximalen Bereichen. 3751676
--	---	--	--

Implantat-Reinigung Air-Scaling (Ti-Max*)

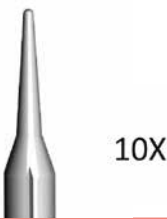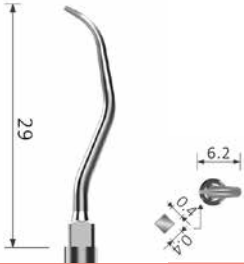 Keydent MyTip ICPpeek Ersatzspitzen Einfaches Auswechseln der Spitze mit dem im ICP-SET enthaltenen Schraubenschlüssel. 3751949	 Keydent MyTip nS1 Universal Scaler Zur Entfernung von Konkrementen im supra- und subgingivalen Bereich. 3751734
---	---

ULTRASCHALLGERÄT

Das leistungsstarke U600 bzw. D600 Ultraschallgerät für die Prophylaxe verfügt über einen Wassertank sowie eine integrierte LED-Beleuchtung. Dank automatischer Frequenzverfolgung passt sich die Frequenz des Geräts an die zu bearbeitende Oberfläche an. Im Lieferumfang des Geräts D600 sind folgende Keydent MyTip Ansätze enthalten: s1S, s10X, s10P, s10Z, s-1, sET40D, ED1, ED2 und sH3. Im Lieferumfang des Geräts U600 sind folgende Keydent MyTip Ansätze enthalten: ePL3, ePS, eA, eP, eH3, E1 und E14D.



Technische Details



3732792 Ultraschallgerät D600 Prophylaxe, inkl. 9 Spitzen, passend für ACTEON/Satelec** Gewinde

3732793 Ultraschallgerät U600 Prophylaxe, inkl. 7 Spitzen, passend für EMS** Gewinde

* Eingetragenes Warenzeichen eines Unternehmens, mit dem die American Dental Systems GmbH in keiner wirtschaftlichen Verbindung steht. Wir vertreiben passende Ansätze für Konsultraschallgeräte von NSK®. NSK® ist eine eingetragene Marke der Nakanishi Inc. Corporation. Ti-Max ist eine Marke der Nakanishi Inc. Corporation.



Designer-Lupenbrillen und Lichtsysteme aus Italien

Univet Optical Technologies, ein italienisches Unternehmen, das 1997 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Vergrößerungssysteme für den chirurgischen und zahnärztlichen Bereich. Es ist bestrebt, höchst innovative Modelle zu erschaffen, die sowohl Sicherheit als auch Komfort und Style miteinander kombinieren und sich so von der Masse abheben.

Angefangen bei der vorgefertigten Quick Loupe bis hin zur maßgeschneiderten High-End-Lupenbrille mit Lichtsystem bietet Univet das passende System für jede Anforderung.

Erfahren Sie mehr



Ohne Lupenbrille



Galilei



Prismatik



Ergo



LYNX UND LYNX PRO



NEU



Die Verwendung einer Lupenbrille verbessert nicht nur die Sicht sondern auch die Arbeitshaltung und bringt damit zahlreiche Vorteile für Ihren Arbeitsalltag:

- Verbesserte Diagnosen und Behandlungen
- Effizienteres Arbeiten
- Entlastung des Nackens und Rückens durch eine aufrechte Arbeitshaltung
- Mehr Komfort und Sicherheit bei der Arbeit
- Bessere Konzentration und Leistungsfähigkeit

Ergo, Prismatik oder Galilei

Univet Ergo Advanced

- Ermöglicht eine natürliche Neigung des Nackens und damit eine perfekte Körperhaltung
- Rundumblick, ohne die Lupenbrille abnehmen zu müssen
- Größeres Sichtfeld und höhere Bildhelligkeit
- Vergrößerungen: 3,5x | 4,5x | 5,7x
- Arbeitsabstände (mm): 300 | 350 | 400 | 450 | 500



Eine Übersicht der Modelle finden Sie ab Seite 28.

Univet MyErgo RFR

- Ermöglicht eine natürliche Neigung des Nackens und damit eine perfekte Körperhaltung
- Größeres Sichtfeld und höhere Bildhelligkeit
- Vergrößerung: 3,5x
- Arbeitsabstände (mm): 350 | 400 | 450 | 500



Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 30.

Univet Prismatik

- Für maximale Vergrößerung und perfekte Bildschärfe dank XS ULTRA-HD
- Außergewöhnliche Detailgenauigkeit
- Höchste Auflösung und perfekte Kantenschärfe
- Vergrößerungen: 4,0x | 5,0x
- Arbeitsabstände (mm): 300 | 350 | 400 | 450 | 500



Eine Übersicht der Modelle finden Sie ab Seite 31.

Univet Galilei

- Breites Sehfeld und beste Tiefenschärfe dank PRO HD Technologie
- Geringes Gewicht
- Intuitiv und vielseitig
- Vergrößerungen: 2,5x | 3,0x | 3,5x
- Arbeitsabstände (mm): 300 | 350 | 400 | 450 | 500
- Auch als vorgefertigte Quick Loupe mit einer 2,5-fachen Vergrößerung erhältlich



Eine Übersicht der Modelle finden Sie ab Seite 33.

Univet MyErgo Galilei

- Scharfe und kristallklare Sicht
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Angenehm leicht zu tragen
- Vergrößerungen: 2,5x | 3,0x
- Arbeitsabstände (mm): 350 | 400 | 450 | 500



Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 36.

Univet Ergo Advanced – Die Modelle

Vergrößerungen:

3,5 x

4,5 x

5,7 x

ITA



Endura Brown

- Hoher Tragekomfort, dank optimaler Gewichtsverteilung
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

ONE



Black Edition

- Leichtes Rahmenmodell aus Aluminium und Titan
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Verstellbarer Nasensteg mit magnetischer Aufhängung zum Anbringen einer LED-Lichtquelle
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

Weitere Farben



Green Vespa



Midnight Blue



Black Edition

Weitere Farbe



Desert Sage





ASH



Grey Carbon

- Eleganter Rahmen, der hauptsächlich aus einer Carbon-Faserverbindung gefertigt ist
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Verstellbarer Nasensteg
- In zwei Rahmengrößen (small & large) erhältlich
- Individualisierbar. Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

TECHNE



NEU

Midnight Blue

- Die neue Techne: kombiniert das sportliche Design mit einem Look & Feel der Premium-Klasse
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Aus ultraleichten und gleichzeitig robusten Materialien gefertigt für einen hohen Tragekomfort
- Das umlaufende Design verringert die Wahrnehmung des Gewichts, da es rund um den Kopf verteilt wird
- Verstellbarer Nasensteg mit Nasenpolstern
- Inklusive elastischem Band

Weitere Farben



Black Green



White Green



White Wisteria



Univet MyErgo RFR – Die Modelle

Vergrößerung: 3,5 x



REGENT



Blau

- Titanrahmen im klassischen Design
- Leicht, robust und einfach zu reinigen
- Medium/Large Fit

SOHO



Roségold

- Titanrahmen im minimalistischen Design
- Leicht, robust und einfach zu reinigen
- Slim Fit

Weitere Farben



Burgunder



Schwarz

Weitere Farben



Violet



Grau



Univet Prismatik – Die Modelle

Vergrößerungen:

4,0 x

5,0 x



ITA



Midnight Blue

- Hoher Tragekomfort, dank optimaler Gewichtsverteilung
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

ONE



Desert Sage

- Leichtes Rahmenmodell aus Aluminium und Titan
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Verstellbarer Nasensteg mit magnetischer Aufhängung zum Anbringen einer LED-Lichtquelle
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

Weitere Farben



Endura Brown



Green Vespa



Black Edition

Weitere Farbe



Black Edition



Univet Prismatic – Die Modelle

Vergrößerungen:

4,0 x

5,0 x



ASH



Dark Carbon Red

- Eleganter Rahmen, der hauptsächlich aus einer Carbon-Faserverbindung gefertigt ist
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Verstellbarer Nasensteg
- In zwei Rahmengrößen (small & large) erhältlich
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

TECHNE



Black Green

- Die neue Techne: kombiniert das sportliche Design mit einem Look & Feel der Premium-Klasse
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Aus ultraleichten und gleichzeitig robusten Materialien gefertigt für einen hohen Tragekomfort
- Das umlaufende Design verringert die Wahrnehmung des Gewichts, da es rund um den Kopf verteilt wird
- Verstellbarer Nasensteg mit Nasenpolstern
- Inklusive elastischem Band

Weitere Farben



Purple Carbon



Grey Carbon



Weitere Farben



Midnight Blue



White Green



White Wisteria

Univet Galilei – Die Modelle



Vergrößerungen:

2,5 x

3,0 x

3,5 x

ITA



Green Vespa

ONE



Black Edition

- Hoher Tragekomfort, dank optimaler Gewichtsverteilung
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

- Leichtes Rahmenmodell aus Aluminium und Titan
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Verstellbarer Nasensteg mit magnetischer Aufhängung zum Anbringen einer Lichtquelle
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

Weitere Farben



Black Edition

Weitere Farbe



Desert Sage



Midnight Blue



Endura Brown



Univet Galilei – Die Modelle

Vergrößerungen:

2,5 x

3,0 x

3,5 x

ASH



Purple Carbon

- Eleganter Rahmen, der hauptsächlich aus einer Carbon-Faserverbindung gefertigt ist
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Verstellbarer Nasensteg
- In zwei Rahmengrößen (small & large) erhältlich
- Individualisierbar: Namensgravur an der Bügel-Außenseite
- Accessoires: Seitenschutz und elastisches Band

TECHNE



White Green

- Die neue Techne: kombiniert das sportliche Design mit einem Look & Feel der Premium-Klasse
- Bietet die Möglichkeit, Korrektionsgläser einsetzen zu lassen
- Aus ultraleichten und gleichzeitig robusten Materialien gefertigt für einen hohen Tragekomfort
- Das umlaufende Design verringert die Wahrnehmung des Gewichts, da es rund um den Kopf verteilt wird
- Verstellbarer Nasensteg mit Nasenpolstern
- Inklusive elastischem Band

Weitere Farben



Dark Carbon Red



Grey Carbon



Weitere Farben



Black Green



Midnight Blue



Wisteria White



LOOK



Emerald

COOL



Ruby

- Leichtes, elegantes Brillenmodell
- Aus handbemaltem Nylon, kombiniert mit Gummi-Einlagen
- Individualisierbar: Gravur des Namens auf der Bügel-Innenseite
- Größe: 52 □ 18

- Leichtes, elegantes Brillenmodell
- Aus handbemaltem Nylon, kombiniert mit Gummi-Einlagen
- Individualisierbar: Gravur des Namens auf der Bügel-Innenseite
- Größe: 56 □ 16

Weitere Farbe



Ruby

Weitere Farbe



Emerald



Univet MyErgo Galilei – Die Modelle

Vergrößerungen:

2,5 x

3,0 x



REGENT



Burgunder

- Titanrahmen im klassischen Design
- Leicht, robust und einfach zu reinigen
- Medium/Large Fit

SOHO



Violet

- Titanrahmen im minimalistischen Design
- Leicht, robust und einfach zu reinigen
- Slim Fit

Weitere Farben



Blau



Schwarz

Weitere Farben



Roségold



Grau



Univet Quick Loupes

Vergrößerungen: 2,5 x



TECHNE GO

NEU



White Wisteria

- Leichtes vorkonfektioniertes Vergrößerungssystem
- TTL-Galilei-System mit 2,5-facher Vergrößerung
- In zwei Arbeitsabständen erhältlich: 350 und 400 mm
- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Abdeckung der integrierten seitlichen Bereiche
- Sehfeld von 104 bzw. 122 mm
- Tiefenschärfe von 105 bzw. 135 mm
- Inklusive elastischem Band

Größe: 66 □ 15

**Erhältlich mit folgenden
vordefinierten Pupillenabständen:**

XS | 54 - 58 mm

S | 58 - 62 mm

M | 62 - 66 mm

Weitere Farben



White Green



Midnight Blue



Black Green

Leistungsstarke Lichtsysteme

EOS wireless

Features

- Lichtintensität: bis zu 38.000 Lux
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 70
- Akkulaufzeit: 140 min/pro Akku (enthält 2 Akkus)
- Gewicht: 36 g
- Steuerung mittels Handgesten dank neuester Hand Gesture Recognition Technology
- Kann per Magnetadapter an jede beliebige TTL-Lupe angebracht werden
- Inklusive: 2 Batterien, Ladegerät, Universalmagnetadapter und UV 525 mm Komposit-Filter



Lichtkegel



LYNX PRO

Features

- Lichtintensität: bis zu 50.000 Lux
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90*
- Akkulaufzeit: bis zu 40 h
- Gewicht: 15 g
- Kann mit der UNIVET Connect App via Smartphone ferngesteuert werden
- Inklusive: Universalmagnetadapter und UV 525 mm Komposit-Filter



Lichtkegel



NEU

LYNX

Features

- Lichtintensität: bis zu 38.000 Lux
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 70
- Akkulaufzeit: bis zu 50 h
- Gewicht: 10,5 g
- Inklusive: Universalmagnetadapter und UV 525 mm Komposit-Filter



Lichtkegel



NEU

Farbwiedergabeindex



CRI 90
LYNX PRO



CRI 70
Standard

* Mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 90 bietet das LYNX PRO Lichtsystem eine originalgetreue Wiedergabe der gesamten Farbskala sowie eine Tiefenausleuchtung, die selbst kleinste Details akkurat hervorhebt.

arLoupe

Bildschirmbasiertes Vergrößerungssystem

Die arLoupe definiert dentale Vergrößerung neu: Statt durch Okulare zu schauen, arbeiten Zahnärzte/-innen mit zwei hochauflösenden Bildschirmen. Das in sich geschlossene System vereint eine bis zu 10-fache optische sowie 12-fache digitale Vergrößerung mit einer integrierten 4K-bzw. HD-Dokumentation und ermöglicht ergonomisches Arbeiten in aufrechter Arbeitshaltung.



Erfahren Sie mehr

Die Highlights im Überblick

Zwei konfigurierbare Lichtmodi plus einsehbare **Orangefilter** für die Polymerisationskontrolle

Bis zu **10-fache optische** und **12-fache digitale Vergrößerung**

Hochauflösende Bildschirme statt Okulare

Bewegliches Visier für eine aufrechte Arbeitshaltung

NEU

Integrierte HD-Video und 4K-Foto-Kamera für eine kontinuierliche Dokumentation

Echtzeit HDMI-Ausgang für Live-Übertragungen ohne Verzögerung

Micro SD-Karte mit 512 GB Speicher

Mobiles Akkusystem mit je zwei Stunden Laufzeit

Die Vorteile im Praxisalltag



Dokumentation ohne Workflow-Unterbrechung

Die integrierte HD-Video und 4K-Foto-Funktion erlaubt eine kontinuierliche Dokumentation, die unmittelbar für die Patientenaufklärung, Verlaufsdokumentation und Fallbesprechung bereitsteht. Eine Live-Übertragung auf externe Monitore ermöglicht eine Echtzeit-Visualisierung für Assistenz und Patienten.



Maximale Detailerkennung

Mit einer bis zu 12-fachen Vergrößerung macht die arLoupe feinste anatomische Strukturen detailliert sichtbar. Wurzelkanaleingänge, Präparationsränder oder marginale Perforationen lassen sich präzise erkennen, ohne die Position zu verändern.



Ergonomisches Arbeiten im Praxisalltag

Das bewegliche Frontelement unterstützt eine aufrechte Arbeitshaltung und reduziert muskuloskelettale Belastungen im Nacken- und Schulterbereich.



Teamfähiges System


Vier Vergrößerungen in einem autarken System, das jeder Behandler in Sekunden auf die individuellen Anforderungen einstellt: individuelle Vergrößerung, Lichtintensität, Bildschirmhelligkeit. Kein Gerätetausch, keine Wartezeiten, keine Investition in mehrfache Ausstattung.



Ihr kompetenter Partner für die Prophylaxe

Individuelle Lösungen für Ihre Praxis

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder suchen nach der besten Lösung für Ihre Praxis? Unser Team steht Ihnen mit persönlicher Beratung zur Seite – telefonisch, online oder vor Ort. **Scannen Sie einfach den QR-Code, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.**

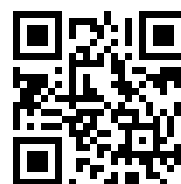

3421

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42
85591 Vaterstetten

T +49 (0)8106 300 300
F +49 (0)8106 300 310
M info@ADSystems.de
W www.ADSYSTEMS.de

Sie finden uns auch auf:

